

Anleitung zur Stuhlprobennahme mit Stuhlprobenröhrchen

u. a. zur Messung in der Reizdarmdiagnostik


1 Dosierstab herausziehen:

Das Stuhlprobenröhrchen am **blauen Konuseinsatz** festhalten (**der blaue Konuseinsatz bleibt verschlossen auf dem Stuhlprobenröhrchen**).

Dann den **gelben Dosierstab** abdrehen und herausziehen.




Die Flüssigkeit **nicht** aus dem Stuhlprobenröhrchen schütten!

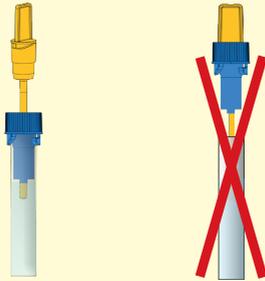

2 Stuhlprobe aufnehmen:

Mit dem Dosierstab **3-mal** an verschiedenen Stellen einer Stuhlprobe einstechen.

Alle Rillen der Dosierstabspitze müssen sich dabei mit Stuhlprobe füllen.

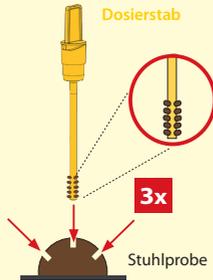


3 Dosierstab nur 1-mal zurückführen:

Den Dosierstab mit der daran haftenden Stuhlprobe **einmal** zurück in das Stuhlprobenröhrchen stecken und **nicht wieder herausziehen**.

Der überschüssige Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Konuseinsatzes abgestreift.

Bitte beachten Sie:

Es darf nur **diese kleine, definierte Stuhlmenge** am Dosierstab in das Stuhlprobenröhrcheninnere gelangen.

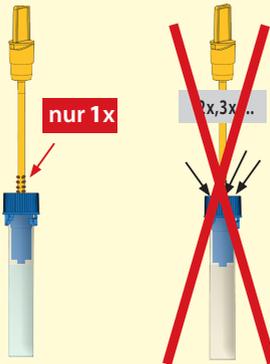


4 Stuhlprobenröhrchen zudrehen:

Dann drehen Sie den Dosierstab so zu, dass der Klickverschluss hörbar einrastet.

Bitte beachten: Die **Stuhllösung** im Stuhlprobenröhrcheninneren **verfärbt sich nahezu gar nicht**.

Wenn Sie allerdings mehr als einmal den Dosierstab in das Stuhlprobenröhrcheninnere einbringen, verfärbt sich bedingt durch zu viel Stuhl die Stuhllösung braun, was dazu führt, dass **Ihre Probe nicht mehr gemessen werden kann** bzw. **Sie ein falsch positives Ergebnis erhalten werden!**

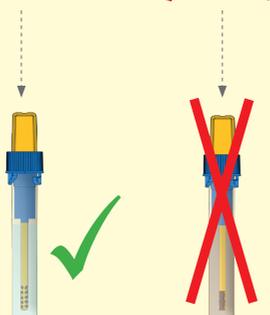

5 Rückgabe der Stuhlprobe:

Bitte schicken Sie die wie unter Punkt 1–4 vorbereitete Stuhlprobe umgehend **ins Labor**. Die Einsendung sollte nicht über das Wochenende erfolgen.

Aufbau des mit **IDK® Amino Extract** gefüllten Stuhlprobenröhrchens **K 7999**



Gelb: Dosierstab mit Klickverschluss

Blau: Konuseinsatz zum Abstreifen überschüssigen Stuhls

← Dosierstabspitze mit Rillen

Vorsichtsmaßnahmen:

- Inhalt des Stuhlprobenröhrchens nicht trinken, direkten Kontakt zur Flüssigkeit vermeiden. Nach Hautkontakt die betroffenen Stellen sofort gründlich waschen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nach der Stuhlprobennahme stets die Hände waschen/ desinfizieren.

Bitte tragen Sie hier die fehlenden Informationen ein und legen Sie diesen Zettel zum befüllten Stuhlprobenröhrchen!



Datum der Stuhlprobennahme

Name, Vorname Patient/in

Geburtsdatum Patient/in

Praxisstempel:

Symbolerklärung:

Temperaturbegrenzung	Hersteller
In-vitro Diagnostikum: nur zur Anwendung außerhalb des Körpers	Chargennummer
Bestellnummer	Verwendbar bis



überreicht durch:

Labor Dr. Hauss

Labor Dr. Hauss
Kieler Straße 71
24340 Eckernförde
Tel.: 04351 88 91 70
Fax: 04351 88 91 270
www.hauss.de

Immunodiagnostik AG
Stübnewald-Allee 8a
64625 Bensheim, Germany
Stand: 2023-05-12
[V210908]